


neodisher[®] Z

Syreholdigt rengørings- og neutraliseringsmiddel til maskinel rengøring af instrumenter og laboratorieglass. Flydende koncentrat



Anvendelsesområder:

- Neutraliseringsmiddel til maskinel rengøring af kirurgiske instrumenter, anæstesi-utensilier, beholdere, operationssko, babyflasker og andet medicinsk udstyr

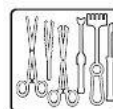

Produktkarakteristika

- Til neutralisering eller som syreholdigt forvaskemiddel til maskinel rengøring af glasudstyr fra laboratorier inden for industri- og vandlaboratorier samt laboratorier inden for den farmaceutiske industri.
- Neutraliserer alkaliske rester fra det primære rengøringsmiddel ved maskinel rengøring.
- Afvasker på pålidelig vis syreopløselige rester ved forvask.
- Yderst skånsomt over for materialer og derfor velegnet til anæstesi-utensilier, kirurgiske instrumenter og andet følsomt udstyr.
- Ikke velegnet til forvask af dele fremstillet af anodiseret aluminium samt forchromede og forniklede dele.

Specielle egenskaber:

- Baseret på organiske syrer.
- Uden fosfater, fosforsyre, nitrogenforbindelser og overfladeaktive stoffer, hvorfor det ikke forstyrrer analyseresultater.
- neodisher Z indeholder mindre end 10 ppm P₂O₅ som koncentrat.

Anvendelse og dosering:

neodisher Z anvendes i vaskedesinfektorer til neutralisering og/eller syreholdig forvask. For neodisher Z anbefales følgende parametre:

Neutralisering	1 - 2 ml/l
Forvask/vask	2 - 5 ml/l ved 40 - 60 °C

Anvend passende doseringsudstyr.

For at undgå pletter anbefales det at anvende deioniseret vand i det afsluttende skyl. Samtidig vil dette beskytte emner af anodiseret aluminium.

Når neodisher Z anvendes til forvask, skal man sikre sig, at emnerne, maskinen og afløbet kan tåle det syreholdige middel. Eternit (fibercement) og støbejern er ikke egnet og kræver neutralisering af opløsningen, der føres til afløb.

Ved anvendelse et weigomatic[®] doseringssystem får du altid en nøjagtig, sikker og økonomisk dosering. Dr. Weigert er et specialiseret firma, som arbejder i overensstemmelse med WHG (Wasserhaushaltsgesetz, Tyskland). Dr. Weigert konstruerer, installerer og vedligeholder centrale og enkeltstående doseringsenheder, så de passer til de aktuelle forhold.

Ovenstående oplysninger er baseret på vores nuværende viden, og beskriver mulige sikkerhedsforanstaltninger i relation til produktet, men udgør ikke en garanti for produktets egenskaber og fastlægger intet kontraktligt retsforhold.

neodisher[®] Z

Syreholdigt rengørings- og neutraliseringsmiddel til maskinel rengøring af instrumenter og laboratorieglass. Flydende koncentrat



Bemærkninger ang. anvendelse:

- Kun til professionel anvendelse.
- Bland ikke med andre produkter.
- neodisher Z arbejdsopløsningen skal afskylles fuldstændigt (helst med deioniseret vand).
- Rens doseringssystemet inkl. slange med vand før skift af produkt.
- Anvendelse bør overholde alle bestemmelser i henhold til direktivet for medicinsk udstyr og efter fornødne validerede processer.
- Følg instrumentleverandørens anbefalinger ang. anvendelse i henhold til kravene i DIN EN ISO 17664. Følg ligeledes anbefalingerne fra glasudstyrets producent.
- Følg instruktionerne fra leverandøren af vaskedesinfektoren.

Tekniske data:

pH-område	3,0 - 2,6 (1 - 5 ml/l, bestemt i deioniseret vand ved 20 °C):
Viskositet	< 10 mPas (koncentrat, 20 °C)
Vægtfylde	1,2 g/cm ³ (20 °C)
Titreringsfaktor	0,36 (iflg. Neodisher Z titreringsinstruktioner)

Indholdsstoffer:

Indholdsstoffer i henhold til EU-forordning nr. 648/2004 ang. vaske- og rengøringsmidler: Konserveringsmiddel (2-octyl-2H-isothiazol-on).

CE-mærkning:




neodisher Z opfylder kravene for medicinsk udstyr i henhold til EU-direktiv 93/42/EF, bilag 1.

Opbevaring:

Produktet skal altid opbevares ved en temperatur mellem -3 og 30 °C

Kan anvendes i 3 år ved anbefalet opbevaring.

For udløbsdato henvises til mærkningen ved timeglasssymbolet  på etiketten.

Ændring af produktets farve kan forekomme ved opbevaring i den fabriksforseglede emballage. Dette har ingen indflydelse på brugsegenskaber, der er relevante ved normal anvendelse.

Advarsler og sikkerhedsanvisninger:

For yderligere information ang. sikkerhed henvises til sikkerhedsdatabladet. Dette kan fx ses på www.drweigert.de under "Service/Downloads".

Bortskaf kun emballagen i tom og lukket tilstand. Der henvises til sikkerhedsdatablad for bortskaffelse af produktrester.

MB 4202 / DK 03-1

Ovenstående oplysninger er baseret på vores nuværende viden, og beskriver mulige sikkerhedsforanstaltninger i relation til produktet, men udgør ikke en garanti for produktets egenskaber og fastlægger intet kontraktligt retsforhold.

